

SPECTRAL IPL PLUS

Nouvelle lumière pulsée délicate – 2024

Épilation DPL + Soins de la peau avec filtre DPL



Créez une nouvelle révolution
du rajeunissement de la peau

SPECTRUM DPL PLUS

Taille du spot : 10×50 mm

Longueur d'onde : 650–950 nm

Durée de vie de la lampe : 1 million de flashes

POIGNÉE DPL AVEC FILTRE

Taille du spot : 10×50 mm





Longueur d'onde : 650–950 nm

Durée de vie de la lampe : 1 million de flashes




Poignée 1 : DPL HR

L'épilation DPL convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes et peut être réalisée sur tous les types de peau.

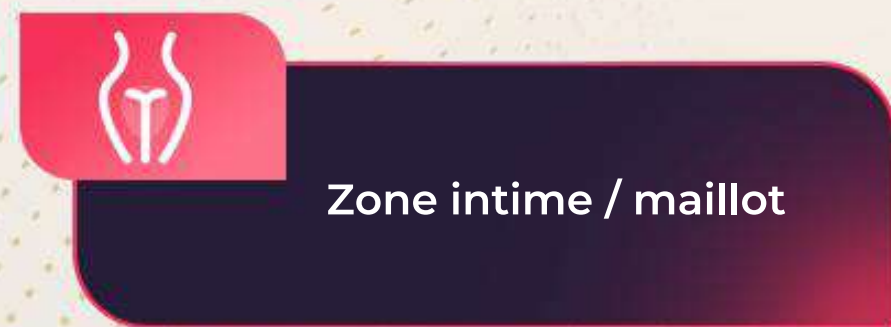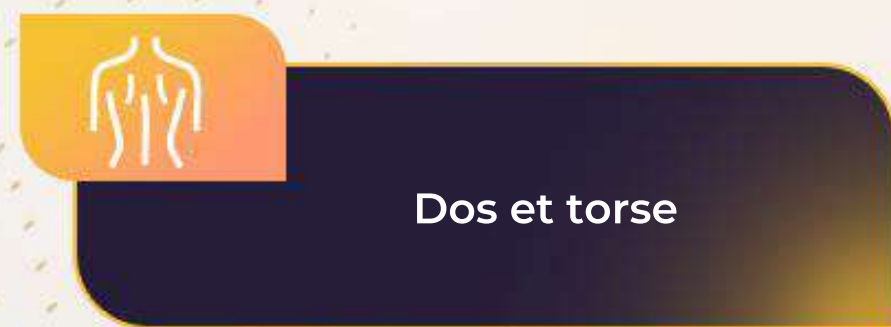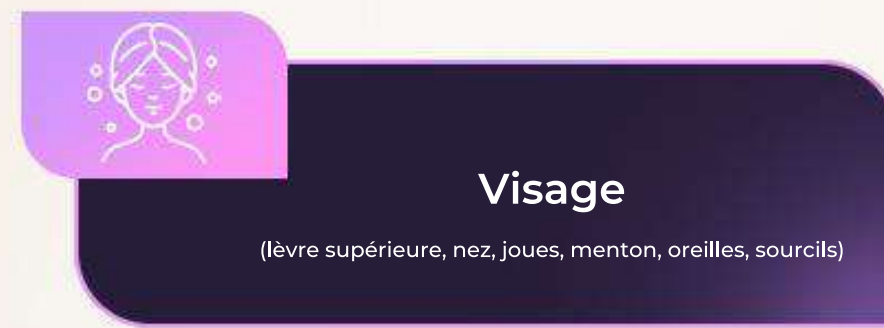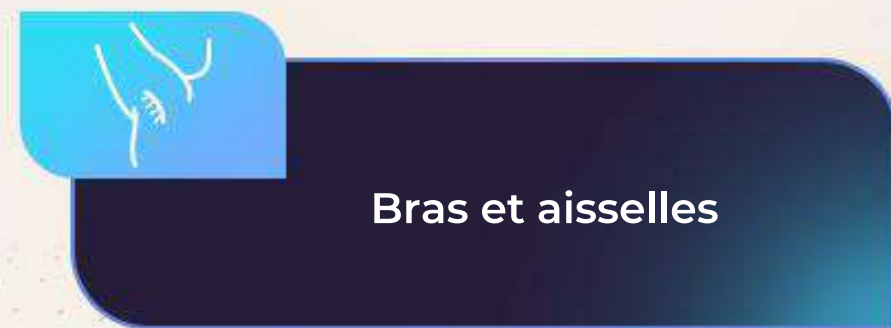

Poignée 1 : DPL HR


Différence entre l'épilation DPL et IPL

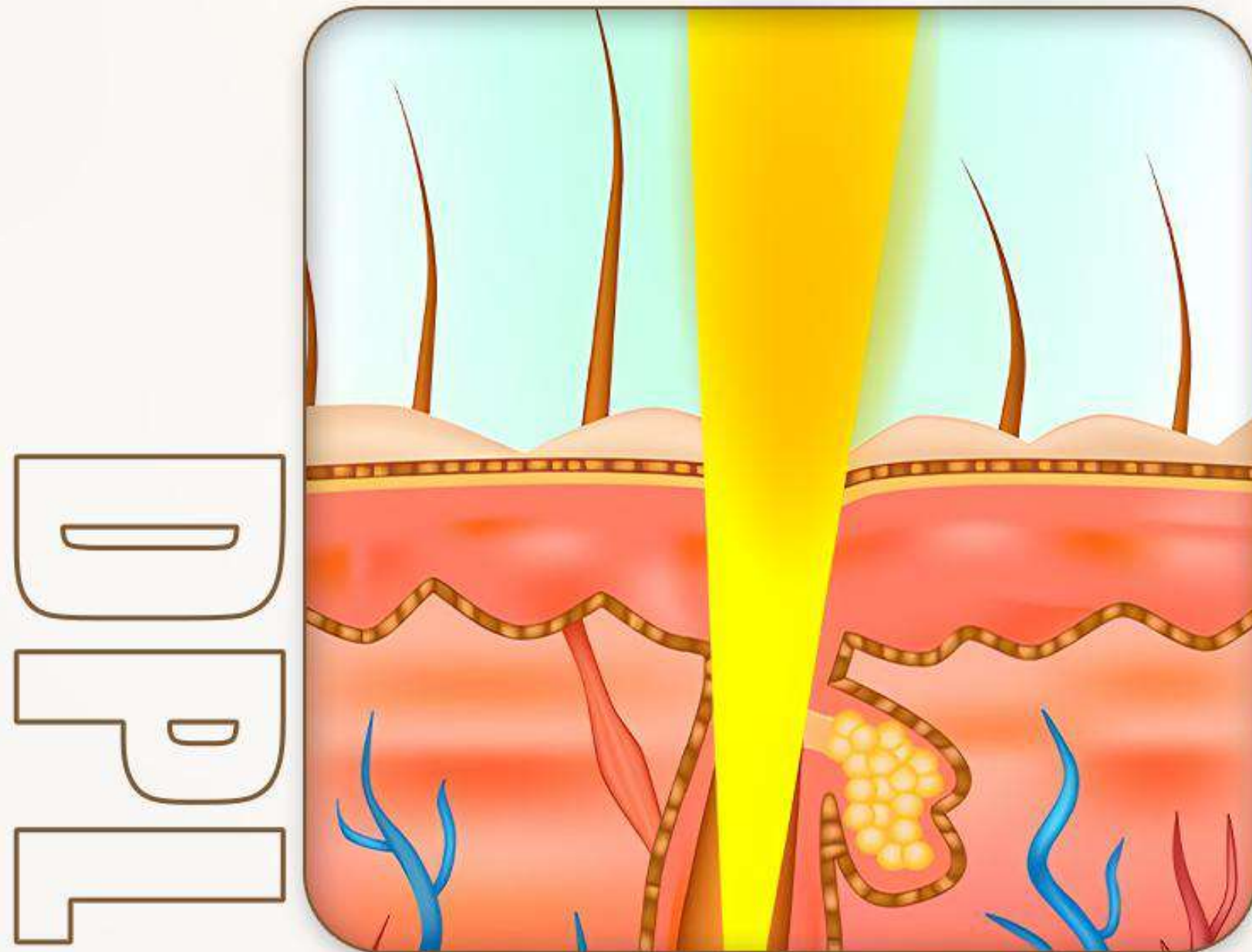

Élimine tous les poils fins et doux

Utilise uniquement des impulsions lumineuses ciblées de manière contrôlée, ce qui permet de traiter efficacement même les poils très fins

Convient à tous types de poils

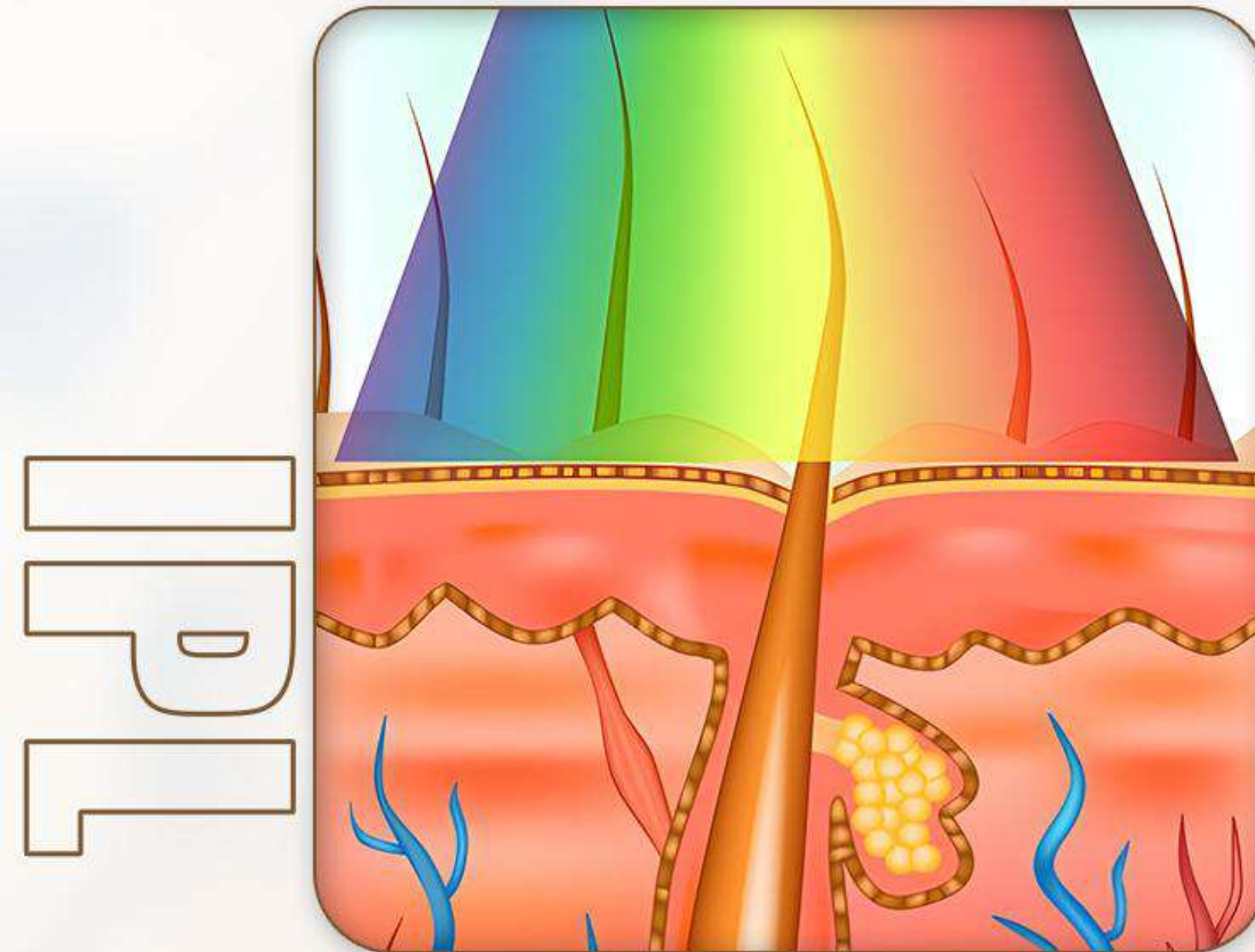

Élimine d'abord les poils épais, puis une petite quantité de poils fins

Exposition continue à la lumière, ce qui rend le traitement long et douloureux

Ne peut être utilisé que sur des types de peau et couleurs de poils spécifiques

Poignée 1 : DPL HR



Épilation rapide à 8 Hz

Poignée 2 : Filtre DPL

AVEC LE FILTRE DPL, LE RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU DEVIENT FACILE.



Acné



Pigmentation de l'épiderme



Pigmentation de l'épiderme,
rosacée et rougeurs



Pigmentation,
vascularisation et soins de la peau



Vaisseaux plus profonds,
soins de la peau, pigmentation et vascularisation



Vaisseaux du visage,
soins généraux de la peau en IPL,
pigmentation et vascularisation



Séborégulation, rides fines,
amélioration de la texture cutanée




Épilation



Anti-âge en profondeur

Principe

Plus la longueur d'onde est élevée,
plus la pénétration est profonde

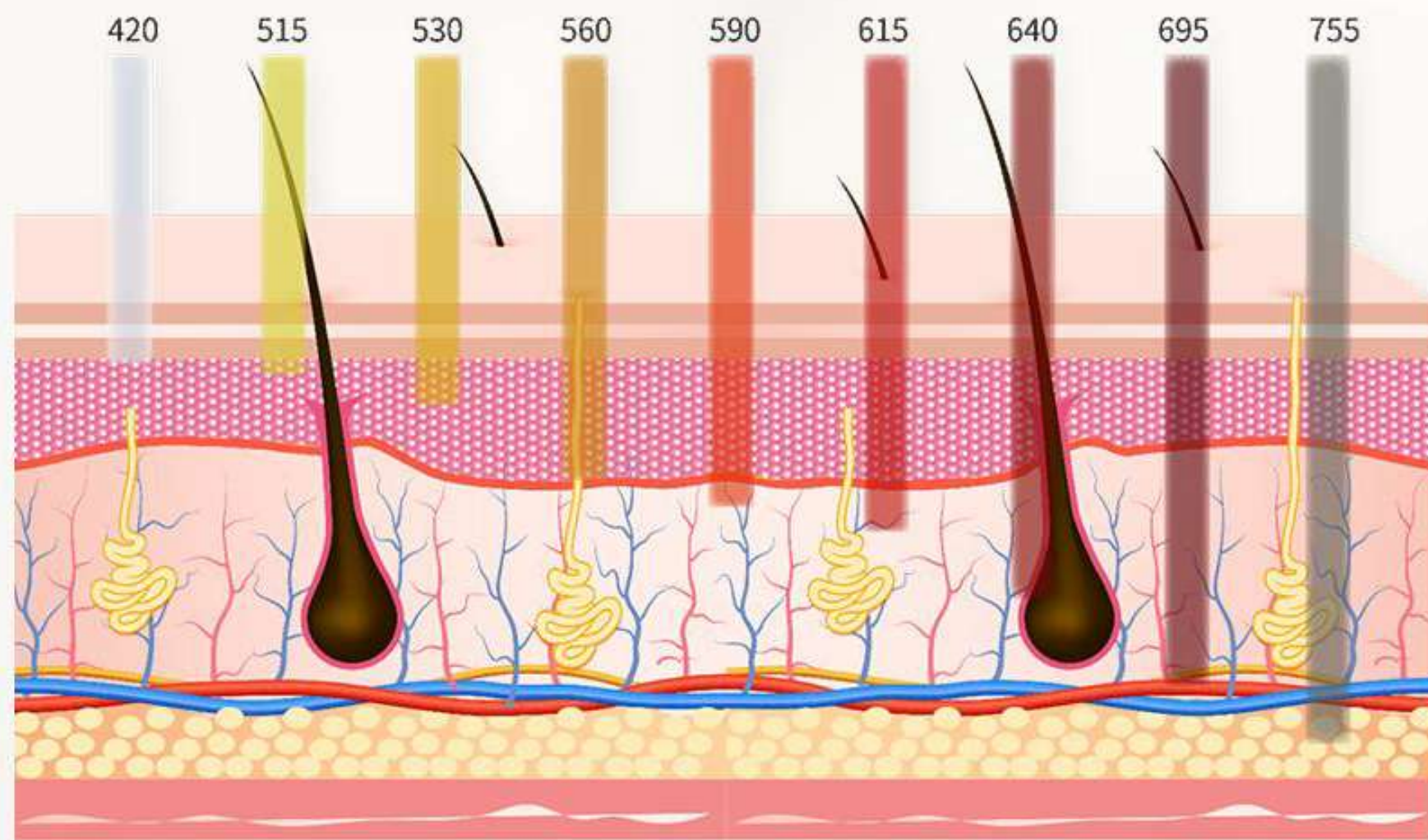

- 01** Rides et ridules 
- 02** Taches pigmentaires, dommages causés par le soleil 
- 03** Pores dilatés 
- 04** Rougeurs, couperose, rosacée 
- 05** Rajeunissement de la peau et acné 

Poignée de refroidissement

- 4 - 20°C

Refroidissement



Adaptateurs de taille de spot


Adaptateurs à changement rapide

Changez rapidement et facilement la taille du spot grâce à des pièces magnétiques, qui s'ajustent instantanément pour un traitement confortable des petites zones ou aux formes complexes.



Technologie OPT et MSP


OPT – Technologie de Pulsation Optimale

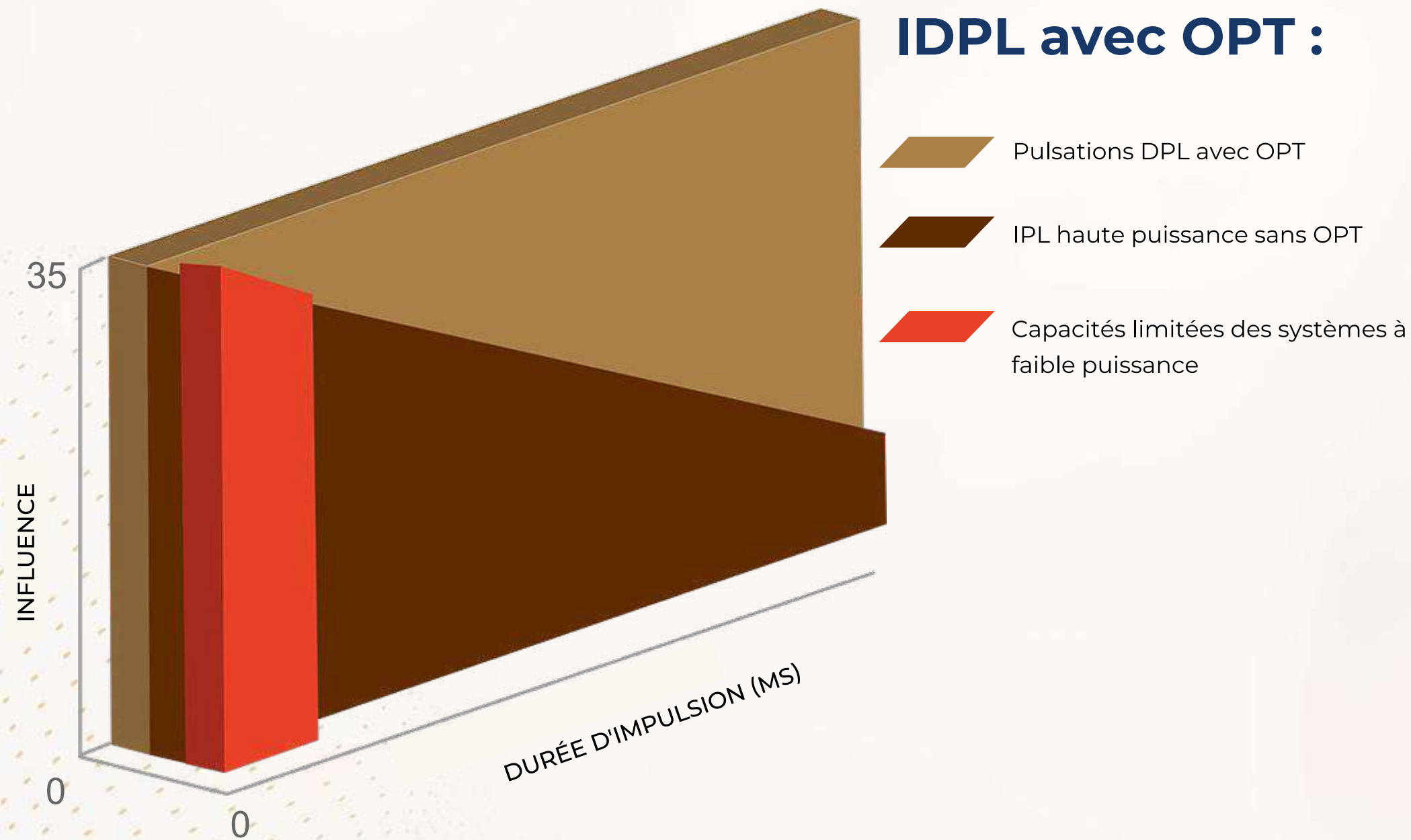

Avantages de l'OPT :

1. Puissance de crête élevée, impulsions plus courtes – idéal pour les soins cutanés DPL, le photorajeunissement et le traitement des lésions pigmentaires bénignes
2. Énergie homogène sur toute la durée de l'impulsion

MSP – Pulsation Séquentielle Multiple

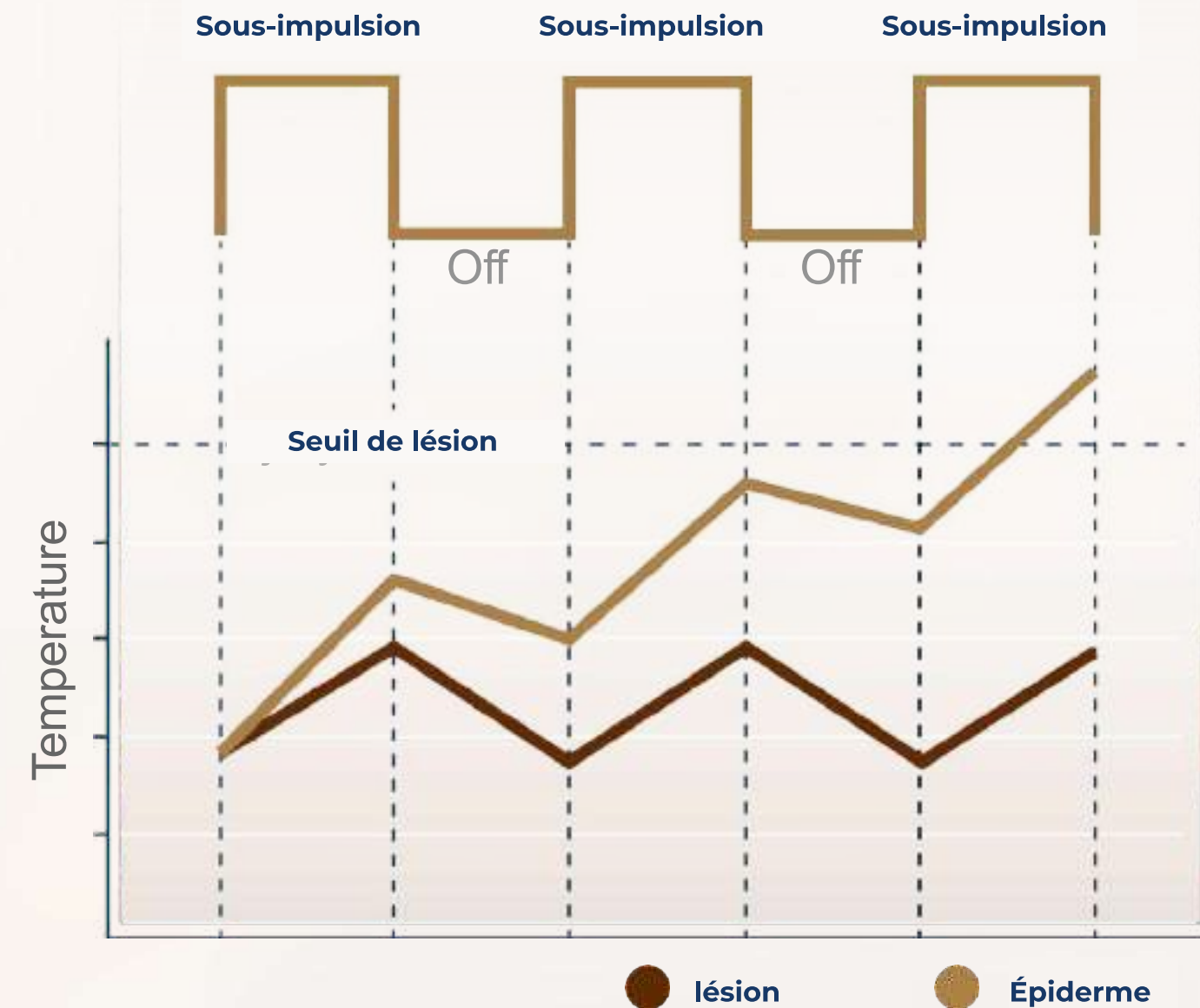

Technologie MSP :

La pulsation séquentielle multiple permet de refroidir la peau entre les impulsions, réduisant ainsi le risque de dommages cutanés pendant le traitement

Avantages



Traite l'acné, la rosacée, les lésions pigmentées et vasculaires.
Réduit également les taches de vieillesse grâce à la photorajeunissement.



9 filtres, interchangeables en quelques secondes.



Technologie de pulsation optimale (OPT)
Contrôle la forme et la durée de l'impulsion.



Confort du patient entre -4 et 20 °C
Grâce au refroidissement continu par contact.



Pulsation séquentielle multiple (MSP)
Permet une procédure plus sûre grâce au refroidissement entre les impulsions.



Épilation rapide DPL

Interface UI



SDPL POUR UNE ÉPILATION RAPIDE DPL



FILTRE DPL AVEC 9 FILTRES



DPL POUR UNE ÉPILATION PROFESSIONNELLE

Paramètres

Spécifications du DPL Plus

LONGUEUR D'ONDE

420-1200 NM (AVEC FILTRES)
560-950 NM (ÉPILATION)

FILTRES

420 NM ; 530 NM ; 515 NM ; 560 NM ; 590 NM ; 615 NM ;
640 NM ; 695 NM ; 755 NM

FLUENCE

5-25 J/CM²

PUISSANCE D'ENTRÉE

4000 W

SOURCE D'ÉNERGIE

SAPHIR PUR

LAMPE

LAMPE IMPORTÉE D'ALLEMAGNE

TAILLE DU SPOT

15×50 MM

TEMPÉRATURE DE REFROIDISSEMENT

RÉGLABLE DE -4°C À 20°C

DIMENSIONS DU COLIS

65 × 55 × 121 CM

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT PAR EAU INTÉGRÉ +
REFROIDISSEMENT PAR SEMI-CONDUCTEUR +
REFROIDISSEMENT PAR AIR

POIDS


87 KG

ÉCRAN LCD :

ÉCRAN TACTILE COULEUR VÉRITABLE DE 10,4 POUCES



Épilation

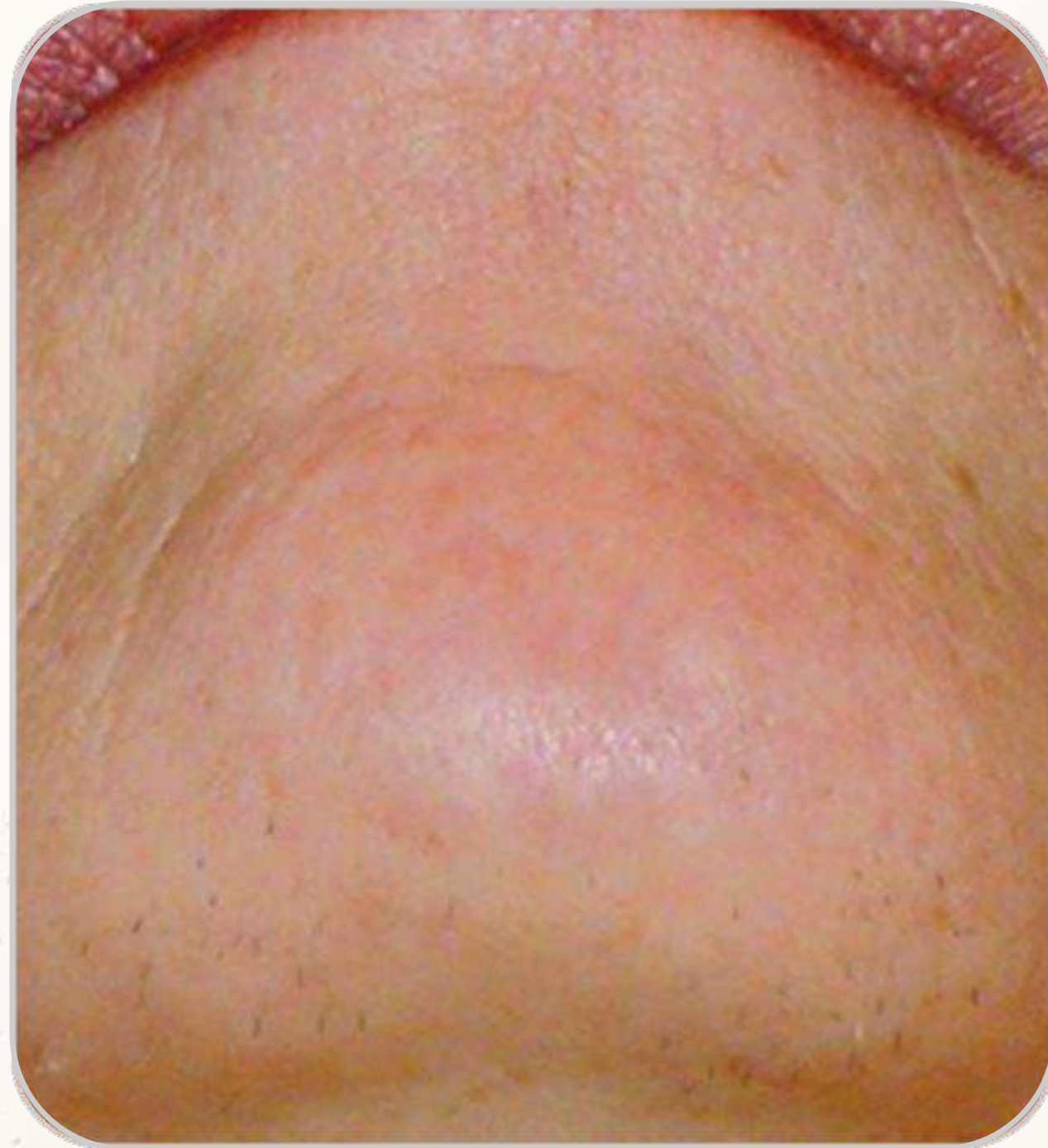

Avant



Après

Effet immédiat

NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOS RÉSULTATS, ALORS VOUS POUVEZ L'ÊTRE AUSSI

Épilation



Avant



Après

Effet immédiat

NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOS RÉSULTATS, ALORS VOUS POUVEZ L'ÊTRE AUSSI

Resserrer les pores



Avant



Après Effet immédiat

NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOS RÉSULTATS, ALORS VOUS POUVEZ L'ÊTRE AUSSI

Rosacée



Avant



Après 2 traitements

NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOS RÉSULTATS, ALORS VOUS POUVEZ L'ÊTRE AUSSI

Tache de rousseur



Avant



Après 2 semaines

NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOS RÉSULTATS, ALORS VOUS POUVEZ L'ÊTRE AUSSI

Tache de rousseur



Avant



Après 4 semaines

NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOS RÉSULTATS, ALORS VOUS POUVEZ L'ÊTRE AUSSI

Inflammation de l'acné



Avant



Après 2 traitements

NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOS RÉSULTATS, ALORS VOUS POUVEZ L'ÊTRE AUSSI

Lèvre de jeune fille



Avant

Après

Effet immédiat

NOUS SOMMES CONFIANTS DANS NOS RÉSULTATS, ALORS VOUS POUVEZ L'ÊTRE AUSSI